



Laboratoires  
Dujardin-Salleron

Découvrez  
le nouveau  
densimètre  
électronique  
intuitif !

## DENSITO 30 PX

### Le densimètre compact «multi-talents»

Grâce à la technique très fiable du tube oscillant, le Densito 30 PX permet d'obtenir des mesures précises de vos moûts et vins en quelques secondes seulement. Plongez le tube dans l'échantillon, appuyez sur la gâchette, lisez le résultat.

#### Echelles prédéfinies

Masse volumique (g/dm<sup>3</sup>), densité à 20°C ou toute autre température, % Brix, ° Baumé, ° Plato, Alcoool % Vol (pour un distillat), etc...

#### Guide intuitif de l'opérateur

Un clavier clairement agencé facilite la commande du Densito : les fonctions des différentes touches sont illustrées par des pictogrammes explicites.

#### Affichage en langage clair

Afficheur rétroéclairé avec des résultats inscrits en grands caractères ainsi que des menus qui permettent une navigation simple.

#### Prélèvement d'échantillon contrôlé

Le Densito 30PX permet de contrôler à volonté la vitesse de prélèvement des échantillons. Il est tout aussi facile de prélever lentement et sans bulles des échantillons très visqueux que de nettoyer rapidement la cellule de mesure par un rinçage rapide.

#### Compensation automatique de la température

Pour les mesures exactes de la masse volumique il faut corriger l'influence de la température par un coefficient de température caractéristique de l'échantillon. Il permet une sélection rapide, avant la mesure, du coefficient prédéfini. La mesure d'échantillons différents en succession rapide ne pose donc pas de problème.

#### Cellule de mesure bien visible


Les bulles d'air ou des impuretés dans la cellule de mesure sont les causes les plus fréquentes de déterminations erronées. Une grande fenêtre permet une excellente visibilité de la cellule de mesure et garantit ainsi la détection rapide de ces sources d'erreur.

#### Résultats sauvegardés et facilement transférés

L'appareil peut enregistrer jusqu'à 1100 résultats de mesure. Ils peuvent être transféré à un ordinateur et à une imprimante à travers l'interface infrarouge intégrée (en option). Un logiciel d'acquisition des résultats sur l'ordinateur est compris dans la livraison.

#### Accessoires

PortableLab™: Densito est livré dans un coffret très pratique, contenant étalons de masse volumique, chiffons de nettoyage, mode d'emploi ainsi qu'un CD-ROM avec le logiciel de saisie des données et les vidéos de présentation.

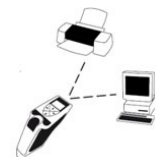

**Laboratoires Dujardin-Salleron**  
872, Route de la Gare - 37210 NOIZAY - France  
Tél : + 33 (0)2.47.25.58.25 - Fax : + 33 (0)2.47.25.58.30  
[info@dujardin-salleron.com](mailto:info@dujardin-salleron.com)  
[www.dujardin-salleron.com](http://www.dujardin-salleron.com)